

*cryo*SPHERE®

- Verbeterde flexibiliteit
- Uniforme toepassing
- Ontworpen voor cryoablatie van de intercostale zenuw

Indicaties

De cryoICE® cryoSPHERE®-cryoablatiesondes van AtriCure zijn steriele instrumenten voor eenmalig gebruik die bedoeld zijn voor het blokkeren van pijn door een tijdelijke ablatie van intercostale perifere zenuwen.

EU-indicaties: AtriCure 's cryoICE cryoSPHERE-cryoablatiesondes zijn steriele instrumenten voor eenmalig gebruik die bedoeld zijn voor het blokkeren van pijn door middel van een tijdelijke ablatie van intercostale perifere zenuwen.

Lees de gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst met contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen voordat u deze instrumenten gebruikt.

ATRICURE, INC.

7555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040 VS
Klantenservice: +1 (866) 349-2342
CustomerService@AtriCure.com
www.AtriCure.com

ATRICURE EUROPE B.V.

De Entree 260
1101 EE Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 20-7005560
Fax: +31 (0) 20-7005561
SalesSupportEU@AtriCure.com
Europe.AtriCure.com

PM-EU-3191A-0125-G

*cryo*SPHERE®


Een niet-farmacologische/niet-opioïde chirurgische behandeling, die gedurende enkele maanden een effectieve postoperatieve pijnbestrijding kan bieden



AtriCure

AtriCure


Een niet-farmacologische/niet-opioïde chirurgische behandeling, die gedurende enkele maanden een effectieve postoperatieve pijnbestrijding kan bieden

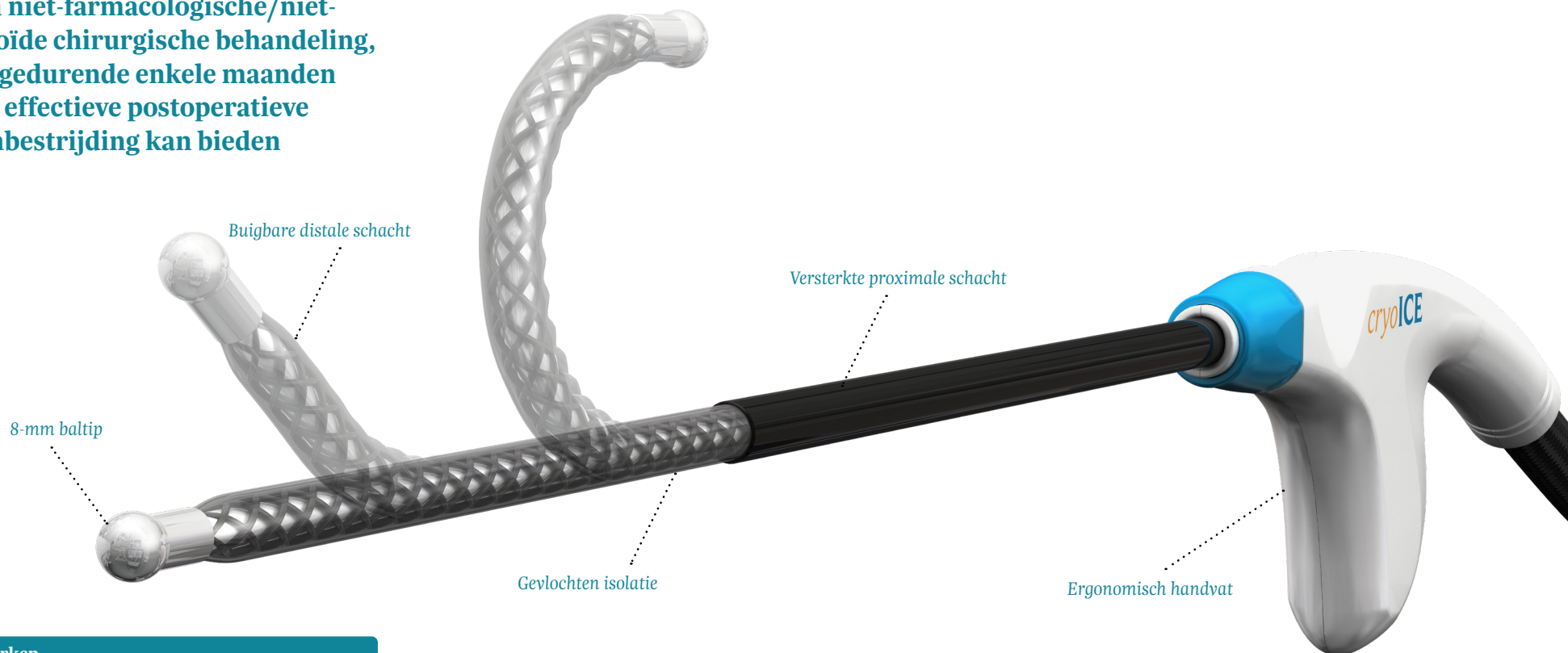

Kenmerken

8-mm baltip	Ontworpen voor minimaal invasieve toepassingen en plaatsing op de intercostale zenuw
Buigbare distale schacht	Buigbare distale schacht t/m 180 graden
Gevlochten isolatie	Technologie die is ontworpen om een temperatuur van meer dan -10 °C in weefsel te handhaven
Versterkte proximale schacht	Zorgt voor stijfheid ter hoogte van de incisiepunten
Ergonomisch handvat	Biedt gebruiksgemak en comfort tijdens cryoablatie
Actief ontdooien	Maakt het mogelijk om de sonde gemakkelijk van de cryoablatieplaats te verwijderen

Buigbare cryoablatiesonde

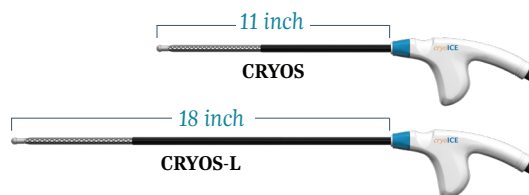

cryoICE BOX® - V6

ACM1 (vs)



cryoICE-kar en upgradesets

- ASCS (kar met dubbele tankhouder, alleen VS)
- ASCC (upgrade van enkele tankhouder)
- ASCC2 (upgrade van dubbele tankhouder)

20-lbs N₂O-tanks niet geleverd door AtriCure



Voetschakelaar (optioneel)

Voor gebruik met ACM1/ACM2
FTSWTCH

